

Gelatine-Kapseln

Sie ermöglichen es, auf einfache und preiswerte Art Harzblöcke für Schnitte zu formen. Sie bestehen aus reiner Gelatine und lassen sich vor dem Schneiden leicht vom Block entfernen.

Kapselgröße	Volumen in ml	Durchmesser ca.
000	1,37	9,5 mm
00	0,95	8,5 mm
0	0,68	7,0 mm
1	0,50	6,5 mm
2	0,37	6,0 mm
3	0,30	5,5 mm
4	0,21	5,0 mm



G292-09	Gelatine-Kapseln 000	Pack zu 100 Stück
G292-19	Gelatine-Kapseln 000	Pack zu 1000 Stück
G292-08	Gelatine-Kapseln 00	Pack zu 100 Stück
G292-18	Gelatine-Kapseln 00	Pack zu 1000 Stück
G292-00	Gelatine-Kapseln 0	Pack zu 100 Stück
G292-10	Gelatine-Kapseln 0	Pack zu 1000 Stück
G292-01	Gelatine-Kapseln 1	Pack zu 100 Stück
G292-11	Gelatine-Kapseln 1	Pack zu 1000 Stück
G292-02	Gelatine-Kapseln 2	Pack zu 100 Stück
G292-12	Gelatine-Kapseln 2	Pack zu 1000 Stück
G292-03	Gelatine-Kapseln 3	Pack zu 100 Stück
G292-13	Gelatine-Kapseln 3	Pack zu 1000 Stück
G292-04	Gelatine-Kapseln 4	Pack zu 100 Stück
G292-14	Gelatine-Kapseln 4	Pack zu 1000 Stück

Die angegebenen Mengen gelten näherungsweise.



Halter für Gelatine-Kapseln der Größe 00

Dieser Halter nimmt 25 Gelatine-Kapseln der Größe 00 auf.

130-15	Halter für Gelatine-Kapseln 00
---------------	--------------------------------



Aluminium-Schälchen

Diese Aluminium-Schälchen können zur Flacheinbettung verwendet werden. Bei der Version mit den gerieften Seiten lassen sich diese dehnen, damit der Harzblock leicht entnommen werden kann.

G3912	Aluminium-Schälchen, 43 mm Ø x 11 mm hoch, 100 Stück
G3651	Aluminium-Schälchen, 57 mm Ø x 15 mm hoch, 100 Stück
G3651A	Aluminium-Schälchen, 70 mm Ø x 15 mm hoch, 100 Stück




NS192A	Aluminium-Schälchen, 33 mm Ø x ca. 7 mm hoch, 100 Stück
NS192B	Aluminium-Schälchen, 57 mm Ø x 15 mm hoch, 100 Stück
NS192C	Aluminium-Schälchen, 70 mm Ø x 15 mm hoch, 100 Stück

MICRO-Einbettungsformen

Streifen mit zehn nummerierten Formen der Größe 00 (8 mm Durchmesser). Die Formen sind aus Polyethylen und bilden eine pyramidenförmige Spitze mit 1 mm² Fläche. Die MICRO-Einbettungsformen sind ohne Halter zu gebrauchen.

G3505 MICRO-Einbettungsformen, Pack zu 10 Streifen

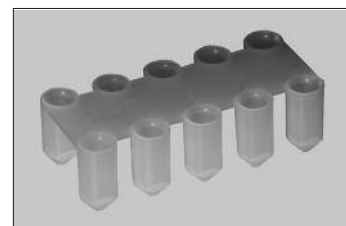

Einbettkapseln mit flachem Boden

Diese verschließbaren Kapseln mit flachem Boden haben angelaschte Deckel. Innenmaße 8 mm Ø x 19 mm Höhe. Die Kapseln aus Polyethylen sind geeignet für Temperaturen bis 75 °C, die aus Polypropylen bis 100 °C. Nicht in Verbindung mit dem Einbettmittel LR White verwenden.

G3744 Einbettkapseln mit flachem Boden, Polyethylen, 500 Stück

G3759 Einbettkapseln mit flachem Boden, Polypropylen, 500 Stück



Mini-Röhrchen

Diese UV-transparenten Mini-Röhrchen (Polyethylen) eignen sich für die UV-Polymerisation von LR Gold und LR White. Der Deckel schließt das Röhrchen fest zu.

Fassungsvermögen: 0,2 ml

Länge: 13 mm

Außendurchmesser: 7 mm Ø

G3971 Mini-Röhrchen, Pack zu etwa 125 Stück



BEEM®-Kapseln

Die bekannten Kapseln der Firma BEEM® liefern Blöcke, welche vor dem Schneiden praktisch nicht getrimmt werden müssen. Es handelt sich um Kapseln verschiedener Formen und Größen aus Polyethylen mit anhängendem Deckel.

BEEM®-Kapseln 00

1 mm² große Spitze; pyramidenförmig.

G360-1 BEEM®-Kapseln 00, Pack zu 100 Stück

G360-2 BEEM®-Kapseln 00, Pack zu 1000 Stück



BEEM®-Kapseln 00 konisch

Konische Spitze; geeignet für Teilchen, die in ein Pellet zentrifugiert wurden, oder für sehr kleine Gewebestückchen.

G361-1 BEEM®-Kapseln 00 konisch, Pack zu 100 Stück

G361-2 BEEM®-Kapseln 00 konisch, Pack zu 1000 Stück

BEEM®-Kapseln 00 halb-hyperbolisch

Anwendbar bei sehr kleinen oder länglichen Gewebestückchen.

G363-1 BEEM®-Kapseln 00 halb-hyperbolisch, Pack zu 100 Stück

G363-2 BEEM®-Kapseln 00 halb-hyperbolisch, Pack zu 1000 Stück

BEEM®-Kapseln 3


Ähnlich in der Form wie BEEM® 00, entsprechen sie in der Größe den Gelatine-Kapseln Nr. 3.

G362-1 BEEM® -Kapseln 3, Pack zu 100 Stück

G362-2 BEEM® -Kapseln 3, Pack zu 1000 Stück.

BEEM®-Kapselhalter 00

Dieser mit laufenden Nummern versehene Halter fasst 22 BEEM®-00-Kapseln und hält sie während des Füllens und Aushärtens in senkrechter Position. Das Loch im Boden jeder Vertiefung verhindert Druckaufbau und erlaubt Durchleuchtung zur Prüfung der Blöcke.

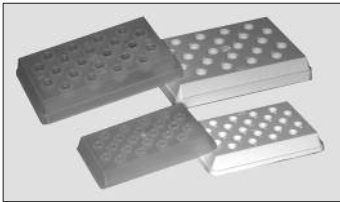

G364 BEEM® -Kapselhalter 00

Für die Verwendung im Zusammenhang mit UV-härtenden Einbettmitteln gibt es die Kapselhalter in UV-Licht-durchlässiger Ausführung.

G3525 BEEM® -Kapselhalter 00, UV-Lichtdurchlässig

BEEM®-Kapselhalter 3

Bestimmt zur Aufnahme der kleineren BEEM®-Kapseln 3.

G365 BEEM®-Kapselhalter 3

Für die Verwendung im Zusammenhang mit UV-härtenden Einbettmitteln gibt es die Kapselhalter in UV-Lichtdurchlässiger Ausführung.

G3526 BEEM®-Kapselhalter 3, UV-Lichtdurchlässig

BEEM®-Flacheinbettungsform

Diese transparente, mehrfach verwendbare Form aus Polyethylen besitzt zwölf nummerierte Vertiefungen und produziert glatte Blöcke von 12 mm x 5 mm x 3 mm Tiefe. Unter Einsatz von Durchlicht hilft die Transparenz des Materials bei der Ausrichtung der Probe. Diese Form ist besonders bei Gebrauch spezieller Einbettmittel, wie LR White, JB4 und Methacrylaten, geeignet, welche in gewöhnlichen Einbettformen nicht gut auspolymerisieren. Kommen in Kunststoffschachtel mit anhängendem Deckel zur Auslieferung.



G3654 BEEM®-Flacheinbettungsform, transparent

Für die Verwendung im Zusammenhang mit UV-härtenden Einbettmitteln gibt es die Kapselhalter in UV-Lichtdurchlässiger Ausführung.

G3526 BEEM®-Kapselhalter 3, UV-Lichtdurchlässig



BEEM®-Block-Speicher


Eine kleine, ausgeformte Kunststoffschachtel mit nummerierten Fächern zur Aufbewahrung von zehn Blöcken der Größe 00. Klarer Kunststoffdeckel mit Schnappverschluss.

G366 BEEM®-Block-Speicher

MEM-Aufbewahrungsschachtel für 32 Netzchen und 8 Einbettungsblocks

Die im ersten Kapitel dieses PLANO Kataloges ausführlicher beschriebene Aufbewahrungsschachtel hat das Außenmaß 81 mm x 54 mm x 14 mm.

161-32 MEM-Aufbewahrungsschachtel für 32 Netzchen und 8 Einbettungsblocks

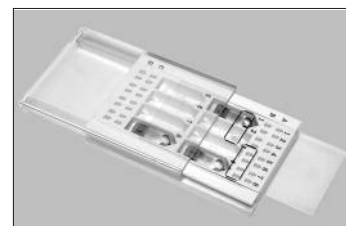

Peel-A-Way® Einweg-Einbettformen

Diese abziehbaren Einweg-Einbettformen sind für die gebräuchlichen Einbettmedien geeignet. Insbesondere auch für Paraffin-Wachs. Die I.D.-Schilder dienen zur Identifikation der Einbettformen.

27110 Peel-A-Way® Einweg-Einbettformen, 22 mm quadratisch, 20 mm tief, 288 Stück

27112 Peel-A-Way® Einweg-Einbettformen, 22 mm x 30 mm, 20 mm tief, 288 Stück

27114 Peel-A-Way® Einweg-Einbettformen, 25 mm x 45 mm, 20 mm tief, 264 Stück

27116 Peel-A-Way® Einweg-Einbettformen, 22 mm quadratisch, pyramidenförmig auf 9,5 mm Boden zugespitzt, 288 Stück

27118 Peel-A-Way® Einweg-Einbettformen, 22 mm quadratisch, pyramidenförmig auf 12 mm Boden zugespitzt, 288 Stück

27124 Peel-A-Way® Identifikationsschilder, 8000 Stück



Einbettformen aus PVC

Diese PVC-Einbettformen sind preisgünstig genug, um sie als "Einweg"-Form zu betrachten und dennoch fest genug, um sie erneut zu verwenden. Sie bieten einen guten thermischen Austausch. Die Oberfläche ist glatt und die Ecken sind abgerundet, um ein leichtes Herauslösen aus der Form zu gewährleisten. Sie sind in denselben Größen hergestellt, wie Metall-Formen, so dass sie für die gleichen Kassettentypen und Einbettringe verwendet werden können.

27147-1 Einweg-Einbettform, 7 mm x 7 mm x 5 mm, 500 Stück

27147-2 Einweg-Einbettform, 15 mm x 15 mm x 5 mm, 500 Stück

27147-3 Einweg-Einbettform, 24 mm x 24 mm x 5 mm, 500 Stück

27147-4 Einweg-Einbettform, 30 mm x 24 mm x 5 mm, 500 Stück

27147-5 Einweg-Einbettform, 37 mm x 24 mm x 5 mm, 500 Stück

27147-6 Einweg-Einbettform, 37 mm x 24 mm x 10 mm, 500 Stück



Tissue-Tek® Cryomold® - Einbettformen für O.C.T.-Compound

In den Tissue-Tek® Cryomolds werden mit dem eingefüllten O.C.T. Compound (unsere PLANO Artikelnummer R1180) einheitlich geformte Präparatblöcke mit einer flachen Oberfläche für Gefrierschnitte geformt (konzipiert für die Verwendung mit dem Tissue-Tek® II M/C). Diese Cryomolds passen in die Cryobar® Gefrierleiste.

Es werden drei Typen angeboten:

CS24557 Cryomold® Standard, 25 mm x 20 mm x 5 mm, 100 Stück

CS24565 Cryomold® Biopsie, 10 mm x 10 mm x 5 mm, 100 Stück

CS24566 Cryomold® Medium, 15 mm x 15 mm x 5 mm, 100 Stück



Tissue-Tek® Cryomold® runde Einbettformen

Diese runden Cryomold® sind mit einer Lasche versehen, um einfaches Handhaben zu gewährleisten.

CS24728 Cryomold® Standard, rund (23 mm Ø x 5 mm tief), 100 Stück

CS24730 Cryomold® Biopsie, rund (15 mm Ø x 5 mm tief), 100 Stück



Tissue-Tek® Einbettformen aus Edelstahl

Diese wiederverwendbaren Tissue-Tek® Einbettformen aus Edelstahl sind für die Verwendung mit den Tissue-Tek® Gewebe- und Biopsie- Kassetten konzipiert. Sie sind 5 mm tief und verfügen über eine seitlich aufragende Lasche, an der man die Formen leicht manipulieren kann, ohne dass man das Einbettmedium berührt. Der flache Metallboden erlaubt bestmöglichen Wärme/Kälte-Austausch und ein problemloses Herauslösen des Paraffin-Blockes. Diese Formen können auch mit den Prozess-/Einbett-Kassetten-Systemen verwendet werden.



CS24161	Tissue-Tek® Einbettform, 7 mm x 7 mm x 5 mm, 12 Stück
CS24162	Tissue-Tek® Einbettform, 15 mm x 15 mm x 5 mm, 12 Stück
CS24163	Tissue-Tek® Einbettform, 24 mm x 24 mm x 5 mm, 12 Stück
CS24164	Tissue-Tek® Einbettform, 30 mm x 24 mm x 5 mm, 12 Stück
CS24165	Tissue-Tek® Einbettform, 37 mm x 24 mm x 5 mm, 12 Stück

CS27055	Paraform® Einbettform Standard, 32 mm x 24 mm x 5 mm. 12 Stück
CS27056	Paraform® Einbettform Biopsie/Orientierung, 25 mm x 18 mm x 5 mm. 12 Stück
CS27057	Paraform® Einbettform Biopsie, 13 mm x 13 mm x 5 mm. 12 Stück

Tissue-Tek® Einbettformen aus Edelstahl, für die Verwendung mit Einbettringen

Diese Formen sind ebenfalls wiederverwendbar und erhältlich mit den Tiefen 6 mm oder 12 mm.

CS24121	Tissue-Tek® Einbettform, 16 mm x 16 mm x 6 mm, 12 Stück
CS24122	Tissue-Tek® Einbettform, 22 mm x 22 mm x 6 mm, 12 Stück
CS24123	Tissue-Tek® Einbettform, 32 mm x 25 mm x 6 mm, 12 Stück
CS24124	Tissue-Tek® Einbettform, 38 mm x 25 mm x 6 mm, 12 Stück
CS24131	Tissue-Tek® Einbettform, 22 mm x 22 mm x 12 mm, 12 Stück
CS24132	Tissue-Tek® Einbettform, 32 mm x 25 mm x 12 mm, 12 Stück
CS24133	Tissue-Tek® Einbettform, 38 mm x 25 mm x 12 mm, 12 Stück

Pelco® Einbettformen aus Edelstahl

Diese Formen werden von Pelco® als Alternative zu den hochpreisigeren Formen hergestellt. Diese sind wiederverwendbar, haben zusätzlich Ausläufer, welche die Stabilität während des Befüllens erhöhen und eine zusätzliche Lasche für die Handhabung.





27280	Pelco® Einbettform, 7 mm x 7 mm x 5 mm, 12 Stück
27281	Pelco® Einbettform, 15 mm x 15 mm x 5 mm, 12 Stück
27282	Pelco® Einbettform, 24 mm x 24 mm x 5 mm, 12 Stück
27283	Pelco® Einbettform, 30 mm x 24 mm x 5 mm, 12 Stück
27284	Pelco® Einbettform, 37 mm x 24 mm x 5 mm, 12 Stück

Easy-Moulds

Diese Polyethylen-Einbettformen haben Spitzen, durch die man das Objekt sehen und damit leichter ausrichten kann. Die polymerisierten Blöcke können mit dem Daumen herausgedrückt werden. Die standfesten Formen für 20 Blöcke sind für eine gleichmäßige Polymerisation gut belüftet. Für das Aushärten unter Luftabschluss sind sie leicht stapelbar. Benutzte Formen können auch als Lagerfach für Blöcke dienen.

G3742 Easy-Moulds, für 5,6 mm Ø, Größe Nr. 3, 10 Stück

G3743 Easy-Moulds, für 8,0 mm Ø, Größe Nr. 00, 10 Stück

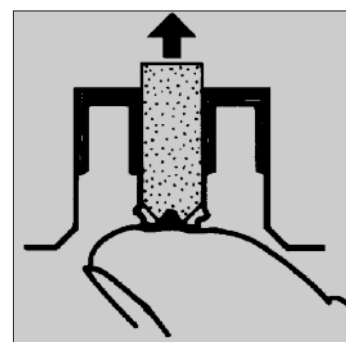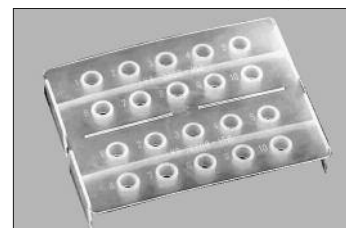

Einweg-Einbettformen


Die Einweg-Einbettformen aus PVC werden mit drei verschiedenen Vertiefungen angeboten, wobei sich in jeder Form fünf dieser Vertiefungen befinden. Sie können auch zur Herstellung von Kunststoff-Montageblöckchen für die Mikrotomie verwendet werden.

G3553 Einweg-Einbettformen aus PVC, 5 Vertiefungen 13 mm x 5 mm x 5 mm, 50 Stück

G3554 Einweg-Einbettformen aus PVC, 5 Vertiefungen 13 mm x 8 mm x 5 mm, 50 Stück

G3555 Einweg-Einbettformen aus PVC, 5 Vertiefungen 12 mm x 15 mm x 5 mm, 50 Stück

G3552 Einweg-Probenteller als Deckel zu G3553. Pack zu 100 Stück.

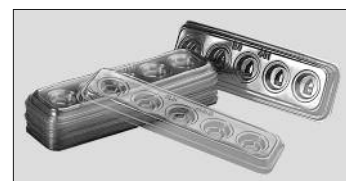

Große histologische Einbettformen

In den vorhergehenden Katalogen zeigten wir diese große histologische Einbettform aus weißem Silikonkautschuk mit dem Hinweis, diese auch mit einer Version „in speziellem, besonders resistentem Material“ liefern zu können, was eigentlich gedacht war für die Verwendung mit Spurr-Harz. Diese Spurr-Harz resistente Form kann leider nicht mehr angeboten werden.


Die Grundfläche der Blöcke ist jeweils 25 mm x 25 mm. Der das Schnittmaterial enthaltende Teil der Form kommt in 4 Größen:

G3510N Histologische Form Größe A/neu, 10 mm x 10 mm x ca. 9 mm tief

G3511N Histologische Form Größe B/neu, 10 mm x 15 mm x ca. 9 mm tief

G3512N Histologische Form Größe C/neu, 10 mm x 20 mm x ca. 9 mm tief


G3513N Histologische Form Größe D/neu, 10 mm x 25 mm x ca. 9 mm tief

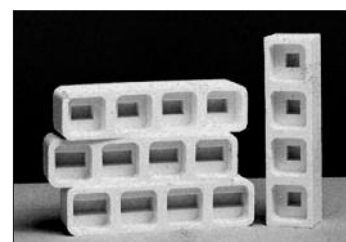


Flache Einbettungs-Gießformen

Die sehr beliebte Einbettform G369, deren Produktion man vor einigen Jahren einstellte, hat nun eine Nachfolge-Einbettform. Die Vertiefungen wurden von der Form G369 übernommen, ohne allerdings die kleinen 3 mm Ø - Näpfchen am Rand. Eine resistente Version (gegen z.B. Spurr-Harz) wird nicht hergestellt. Die weiße Silikonkautschukform hat 24 flache Vertiefungen mit dem Maß 12,5 mm x 4,5 mm x 3 mm.

G369N Weiße Flacheinbettungsgießform mit 24 Vertiefungen, aus Silikonkautschuk

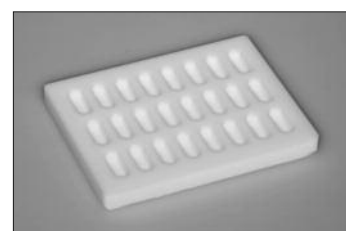

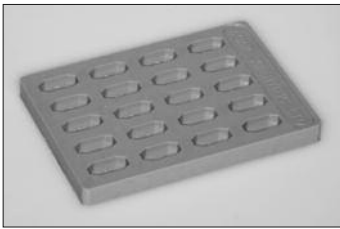

Form mit 20 nummerierten Vertiefungen der Größe 14 mm x 6 mm x 4 mm Tiefe (zwei trapezförmige Enden).

G3531 Flache Einbettungsgießform mit 20 nummerierten Vertiefungen



Form mit 24 nummerierten Vertiefungen der Größe wie G3531 (nur ein trapezförmiges Ende), jedoch mit drei Spezialvertiefungen zur Vielfach-Proben-Einbettung.

G3532 Flache Einbettungsgießform mit 24 nummerierten Vertiefungen



Flache Einbettungsgießform mit 21 Vertiefungen aus blauem Silikonkautschuk.

10590 Flache Einbettungsform aus blauem Silikonkautschuk, 72 mm x 62 mm x 6 mm, mit 21 nummerierten Vertiefungen je 14 mm x 5 mm x 3 mm tief (beidseitig trapezförmige Enden).

Flache Einbettungsgießform



Form mit 20 nichtmarkierten, rechteckigen Vertiefungen der Größe 12 mm x 6 mm x 4 mm Tiefe, mit jeweils einem trapezförmigen Ende. Auch sind acht rechteckige Fächer vorhanden.

G3533 Flache Einbettungsgießform mit 20 + 8 Vertiefungen

PELCO® Flacheinbettungsform

Diese 105 mm x 70 mm x 7 mm großen Formen haben 24 an einer Schmalseite trapezförmige Vertiefungen 7 mm x 14 mm x 3 mm tief, mit Bodenmarkierungen A1 bis A6, B1 bis B6, C1 bis C6 und D1 bis D6. Zudem drei weitere 3 mm tiefe Vertiefungen, von denen zwei 10 mm x 30 mm und eine 10 mm x 17 mm groß sind.



105 Pelco® Flacheinbettungsform, blauer Silikonkautschuk

105-2 Pelco® Flacheinbettungsform, weisser Silikonkautschuk

10504 Pelco® Flacheinbettungsform, transparenter Silikonkautschuk (für UV Einbettung geeignet)

Flacheinbettungsform mit 21 nummerierten Vertiefungen



Diese 74 mm x 61 mm x 6 mm große Form aus blauem Silikonkautschuk hat 21 an einer Schmalseite trapezförmige Vertiefungen mit den Maßen 5 mm x 14 mm x 3 mm tief, mit Bodenmarkierungen 1 bis 21.

10505 Flacheinbettungsform mit 21 nummerierten Vertiefungen

Kleine Einbettform mit 12 Vertiefungen

106 Silikonkautschuk, blau, Außenmaß: 80 mm x 45 mm x 7 mm. 12 Vertiefungen mit je 11 mm x 6,4 mm x 4 mm tief



AMBROSE-MESA-Einbettform

Sie bietet in Silikonkautschuk zwölf flache Vertiefungen von 7 mm Durchmesser für LM und EM. Dank ihrer geringen Tiefe lässt sich die Probe in ihnen zunächst leicht ausrichten. Danach wird eine abgeschnittene Einbettkapsel 00 darauf gesetzt, diese mit Einbettmittel aufgefüllt und mit der Probe ausgehärtet.

107 AMBROSE MESA flache Einbettform mit 12 Vertiefungen




Polyethylen-Einwegeinbettform

Weiche Polyethylen-Einbettform für den einmaligen Gebrauch. Dies verhindert Verschmutzungen mit vorhergehendem Einbettmaterial. Sie ist eine ökonomische Alternative zu Silikonkautschuk-Formen.

14 Vertiefungen mit 12,7 mm x 6,35 mm x 3,18 mm, 10 Vertiefungen mit 19 mm x 10 mm x 3,18 mm tief und zwei rechteckige Vertiefungen.

111 Weiche Einweg-PE-Einbettform, 10 Stück

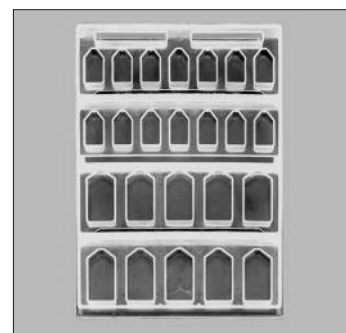

Einbettform mit pyramidenförmigen Vertiefungen

Diese Einbettform ist sehr gut für schwer zu orientierende Objekte geeignet. Die pyramidenförmigen Spitzen werden nach der Polymerisation rasch an Plastikzylinder geklebt. Die entstehende Form entspricht der BEEM® Kapselgröße 00.

Material: Silikonkautschuk mit 30 Vertiefungen.

Die Nummerierung befindet sich außerhalb der Vertiefungen.

Außenmaß der Form: 61 mm x 72 mm x 6 mm,

Maß der Vertiefung: 7 mm x 7 mm, Höhe 4,6 mm, Spitze ca. 0,93 mm Ø rund.

10585 Pelco® Einbettform mit pyramidenförmigen Vertiefungen



Sollen größere Präparate eingebettet werden, kann diese Form verwendet werden:

Material: Silikonkautschuk mit 30 Vertiefungen

Die Nummerierung befindet sich außerhalb der Vertiefungen.

Außenmaß der Form: 61 mm x 72 mm x 6 mm dick

Maß der Vertiefung: 7 mm x 7 mm, Höhe 2,8 mm, Spitze ca. 3 mm x 3 mm.


10586 Pelco® Einbettform mit 3 mm x 3 mm - Spitze



Aufsatz-Zylinder für die entstandenen Formen aus 10585 und 10586

Diese durchscheinenden Plastik-Zylinder haben einen Durchmesser von 8 mm und eine Länge von 13 mm. Die polymerisierten Formen aus 10585 und/oder 10586 werden mit einem Cyan-Acrylatkleber auf diese Plastik-Zylinder geklebt (die üblichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieser "Sekundenkleber" müssen eingehalten werden).

10580 Aufsatz-Zylinder, 100 Stück

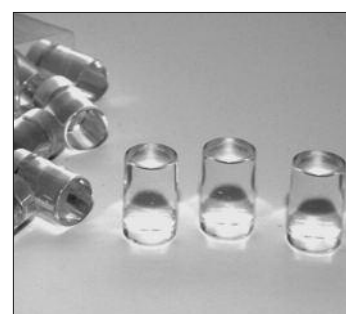




Krazy Glue® Pen

Mit diesem Stift können die polymerisierten Formen aus 10585 und 10586 auf die Plastikzylinder 10580 aufgeklebt werden (Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von "Sekundenklebern" sind einzuhalten).

14450 Krazy Glue® Pen, 3 g


Teflon-Einbettformen für Flacheinbettungen

Diese Einbettformen aus chemisch neutralem Teflon sind besonders gut für die Verwendung mit LR White, LR Gold und Lowicryl sowohl bei UV- als auch bei Wärmepolymerisation geeignet. Der Luftabschluss erfolgt durch THERMANOX-Deckgläser oder ACLAR-Folie. Die Acrylharzblöcke lassen sich durch Biegen der Form leicht auslösen. In den Metallführungsschienen bleibt die Form eben liegen.

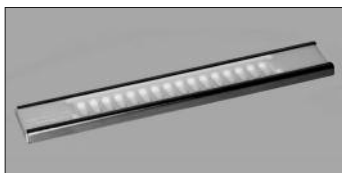


10506 Teflon-Einbettform mit Metallführungsschiene, 16 Vertiefungen 14 mm x 4,8 mm x 3 mm tief

10506-10 Teflon-Einbettform mit Metallführungsschiene, 11 Vertiefungen 14 mm x 6,9 mm x 3 mm tief (Größe 00)

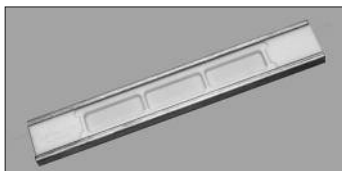

10508 Teflon-Einbettform mit Metallführungsschiene, 3 Vertiefungen 37,6 mm x 13,8 mm x 3 mm tief

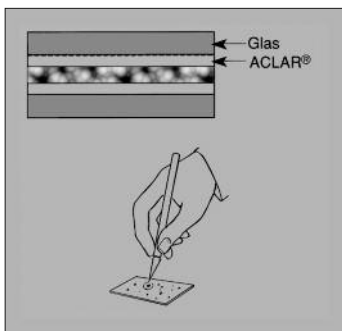


Zur Abdeckung der Teflon-Einbettformen:

10501-10 Aclar-Folie, 0,198 mm stark, 20,3 x 31,8 cm, 10 Folien

L4352 Thermanox-Deckgläser, 22 mm x 60 mm, 100 Stück

FIB/REM - Einbettform für biologische Proben

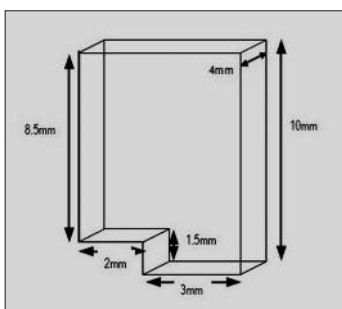

Diese Silikonkautschukform wurde in Zusammenarbeit mit "Cancer Research UK's London Laboratories" entworfen. Diese Form ist derart konzipiert, dass man die einzubettende Probe gut orientieren und trimmen kann, immer im Hinblick auf die Blockausrichtung zum Ionen- und Elektronenstrahl für FIB und REM. Durch das Positionieren der Probe in einer größeren Menge Harz, ist während des FIB - Abtrages das unerwünschte Wiederaufbringen des Materials auf die Blockvorderseite minimiert. Diese Einbettform mit 4 Öffnungen kann bei vorsichtiger Handhabung mehrfach verwendet werden.


G3504 FIB/REM Einbettform für biologische Proben

Folien als Substrat für das Wachstum von Zellkulturen

MELINEX-Folie

Bögen aus MELINEX-Folie von 175 µm Dicke ergeben ein nützliches Substrat für das Wachstum von Zellkulturen und für ihre spätere Einbettung in Blöcken. Die Bögen haben das Format von ca. 210 mm x 297 mm.


L4103 MELINEX-Folie, Pack zu 5 Bögen

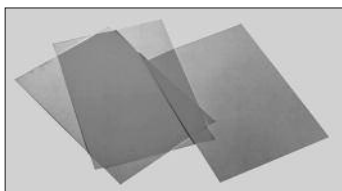

ACLAR-Folie

Diese Folie ohne Weichmacher und Stabilisatoren ist für die Präparation in der Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopie z. B. für die Einbettung von Zellkulturen, Epoxideinbettungen etc. sehr gut geeignet. Die ACLAR-Folie ist chemisch beständig und wird vor allem von Aceton, Ethylalkohol, Osmiumtetroxidlösungen und Propylenoxid nicht angegriffen. Sie bleibt unter flüssigem Stickstoff flexibel, lässt sich schneiden und stanzen, ist auch für Ultramikrotommesser unschädlich, hat eine sehr glatte Oberfläche und nimmt kein Wasser auf. ACLAR-Folie kann als Abdeckung für Flacheinbettungen mit Methacrylaten oder Acrylharzen verwendet werden, da sie Sauerstoff nicht durchlässt und für UV-Licht transparent ist. Sie zeigt keine Fluoreszenz, ACLAR ist unbrennbar und schmilzt bei 200 °C. Sie kann sterilisiert werden.


10501-10 ACLAR-Folie, 0,198 mm stark, 20,3 cm x 31,8 cm, 10 Folien

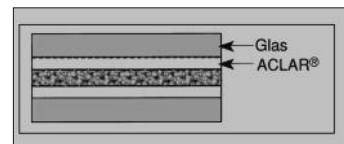

Folien-Handstanzen

Mit diesen Handstanzen können Scheibchen aus den MELINEX- und ACLAR- Folien gestanzt und weiche Folien bis 1,7 mm Stärke bearbeitet werden.

- 54740** Folien-Handstanze für 7,9 mm Ø Scheibchen
- 54741** Folien-Handstanze für 9,5 mm Ø Scheibchen
- 54742** Folien-Handstanze für 11 mm Ø Scheibchen
- 54743** Folien-Handstanze für 12,7 mm Ø Scheibchen

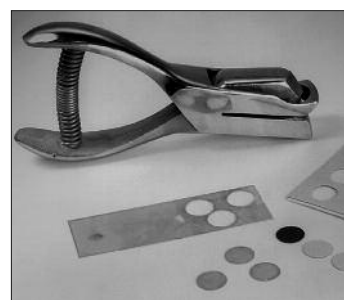

Hartpapier-Laborbecher

Diese Laborbecher aus Hartpapier haben einen Inhalt von ca. 200 ml (Durchmesser ca. 70 mm Ø / Höhe ca. 95 mm).

LPV2010 Hartpapier-Laborbecher, ca. 200 ml, 100 Stück



Polypropylen-Mehrzweck-Becher

Diese kleinen Becher mit Volumenunterteilung sind ideal für das Mischen von Einbettungsmaterialien.

G332A Meßbecher mit Schraubdeckel, PP 100 ml, Pack zu 100 Stück




TRI-POUR-Messbecher


Polypropylen-Meßbecher sind unzerbrechlich, dicht und sauber gearbeitet. Zur Tiefkühlage empfohlen. Im Autoklaven sterilisierbar. Gut stapelfähig. Unterteilung in 10-ml-Schritten.

- G3350** TRI-POUR-Messbecher 50 ml, Pack zu 25 Stück
- G3351** TRI-POUR-Messbecher 100 ml, Pack zu 25 Stück
- G3352** TRI-POUR-Messbecher 250 ml, Pack zu 25 Stück
- G3353** TRI-POUR-Messbecher 400 ml, Pack zu 25 Stück
- G3355** TRI-POUR-Messbecher 800 ml, Pack zu 25 Stück
- G3354** TRI-POUR-Messbecher 1000 ml, Pack zu 25 Stück

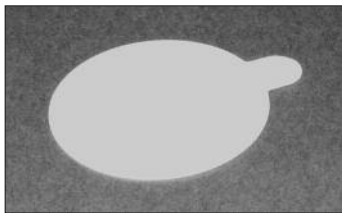


Dicht schließende Pappdeckel für TRI-POUR-Messbecher

G3360	Deckel für	50-ml-Messbecher, Pack zu 25 Stück
G3361	Deckel für	100-ml-Messbecher, Pack zu 25 Stück
G3362	Deckel für	250-ml-Messbecher, Pack zu 25 Stück
G3363	Deckel für	400-ml-Messbecher, Pack zu 25 Stück
G3365	Deckel für	800-ml-Messbecher, Pack zu 25 Stück
G3364	Deckel für	1000-ml-Messbecher, Pack zu 25 Stück

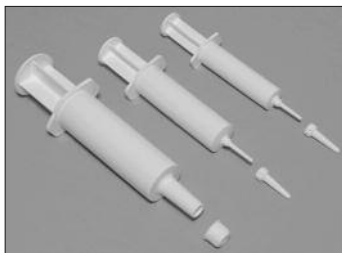Einweg Polyethylen-Spritzen zur Aufbewahrung von z. B. Einbettmedien


Diese PE-Spritzen können zum Beispiel mit Einbettmedien gefüllt werden, die danach eingefroren werden. Durch die Schraubdeckel an den Spitzen wird ein Auslaufen während des Füllens verhindert. Die Spritzen sind silikonfrei.

115-30	Einweg Plastik-Spritze, 15 ml, 20 Stück
115-40	Einweg Plastik-Spritze, 35 ml, 20 Stück
115-60	Einweg Plastik-Spritze, 60 ml, 20 Stück

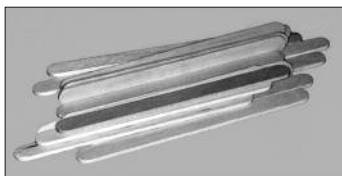**Holz-Rührstäbchen**

Flache, hölzerne Stäbchen zum Rühren von Harzen etc.

G3322	Einweg-Rührstäbchen, Pack zu 100 Stück
--------------	--

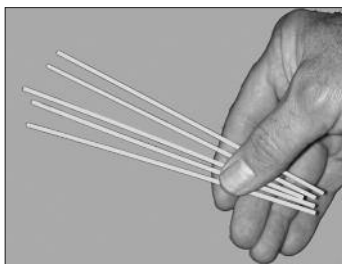**Runde Rührstäbchen, 150 mm lang**

Diese PE-Spritzen können zum Beispiel mit Einbettmedien gefüllt werden, die danach eingefroren werden. Durch die Schraubdeckel an den Spitzen wird ein Auslaufen während des Füllens verhindert. Die Spritzen sind silikonfrei.


128-2	Runde Rührstäbchen aus Holz, 2,4 mm Ø x 150 mm lang. 1000 Stück
--------------	---



C804	Cocktailstäbchen, Länge 80 mm. 1000 Stück
-------------	---


Glasstreifen zur Messerherstellung

Glasmesser sind vielfältig einsetzbar zum Trimmen, für Dickschnitte, Semi-Dünnschnitte und Ultra-Dünnschnitte und in der Kryo-Ultramikrotomie. Sie lassen sich leicht mit dem gewünschten Schneidwinkel herstellen. Wichtig dabei ist die Auswahl hochwertiger und sauberer Glases. Das unten angebotene Glas ist speziell ausgewählt, von gleichbleibend guter Qualität und geeignet für LKB und andere Messer-Herstellgeräte. Jeder Streifen wurde vorgewaschen und einzeln eingewickelt.

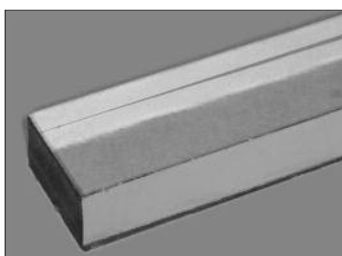**Ultramikrotomie-Glas für LKB- und REICHERT-Messer-Herstellgeräte**


G329	Glasmesser zur Messerherstellung, 406 mm lang, 25 mm breit, 6 mm dick. Pack zu 30 Stück
G3516	Glasmesser zur Messerherstellung, 406 mm lang, 25 mm breit, 8 mm dick. Pack zu 24 Stück

- G330** Glasstreifen zur Messerherstellung, 406 mm lang, 25 mm breit, 10 mm dick. Pack zu 15 Stück.
- G336** Glasstreifen zur Messerherstellung, 203 mm lang, 51 mm breit, 6 mm dick. Pack zu 50 Stück

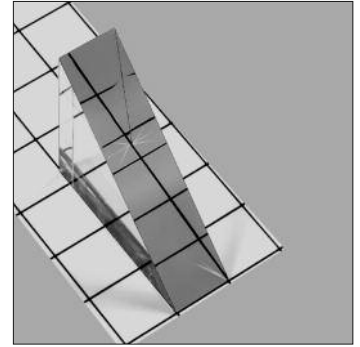

Histologie-Glas für RALPH-Messer-Herstellgeräte

- G335** Glasstreifen zur Messerherstellung, 406 mm lang, 25 mm breit, 6 mm dick. Pack zu 30 Stück
- G3647** Glasstreifen zur Messerherstellung, 406 mm lang, 38 mm breit, 6 mm dick. Pack zu 20 Stück.

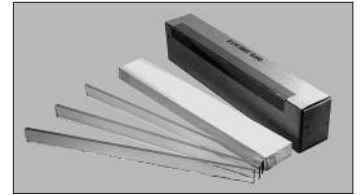

Glasschneider

Glasschneider mit Hartmetallrädchen, 5 mm Ø, für dicke und harte Glassorten

- T574A** Glasschneider mit Hartmetallrädchen



Glas-/Wafer-Brechzange

Zum Lieferumfang dieser Glas- und Wafer-Brechzange gehören 2 Maul-Einsätze (zur Erzeugung des Bruches mit der geritzten Linie, oder wenn die Zange oberhalb des Ritzes das Glas brechen soll).

- 7295** Glas-/Wafer-Brechzange, ca. 15 cm lang



Glasmesser-Aufbewahrungsschachtel

Dient zur staubgeschützten Aufbewahrung frisch gebrochenen Glases von 6 mm bis 8 mm Stärke. Die Bodenplatte aus Silikonkautschuk nimmt 16 Messer auf. Es muss aber erwähnt werden, dass nur frisch gebrochenes Glas sehr gute Schnitteigenschaften hat.


- 8092** Glasmesser-Aufbewahrungsschachtel für 6/7 mm Glas
- 8093** Glasmesser-Aufbewahrungsschachtel für 8 mm Glas



LKB-Trufs

Dieses sind Einweg-Kunststoff-Schiffchen zum Aufsetzen auf Mikrotom-Messer. Sie lassen sich schnell und leicht anbringen, bilden reproduzierbare, saubere Tröge und bieten auch für große Schnittreihen ausreichenden Platz.

- G3327A** LKB-Trufs, äquivalent, Schachtel zu 100 Stück

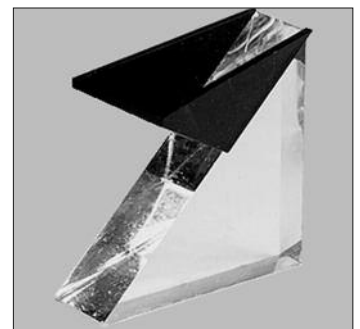




Silberfarbenes Band zur Schiffchen-Herstellung

Silberfarben-beschichtetes Polyester-Band zur Herstellung von Mikrotom-Schiffchen.

G262 Silberband. 9 mm breit, 66 m lang

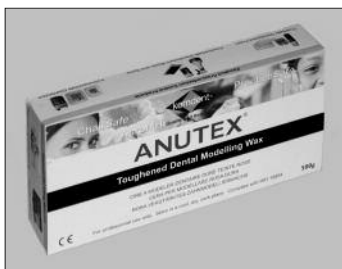

Dental-Wachs

Gut formbares Wachs mittlerer Härte, in handlichen Platten. Dieses Wachs mit niedrigem Schmelzpunkt wird zum Versiegeln von Schiffchen aus Band oder für LKB-Truvs benutzt. Es kann auch als Grundlage zum Färben von Netzen oder für immun-markierte Schnitte Verwendung finden.

Inhalt: ca. 24 Bögen der Größe 185 mm x 90 mm.

G381 Dental-Wachs. Pack zu 500 g

Diamantmesser von DDK (Delaware-Diamond-Knives) und Microstar

Wir bieten Diamantmesser der Firmen DDK (Delaware-Diamond-Knives) und Microstar an, die beide einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Sie verwenden in den Diamantmessern Diamanten in Edelsteinqualität. Die Messer werden mit Standard-Booten geliefert, es besteht aber auch die Möglichkeit, sich weitere Boote alternativ ansetzen zu lassen (fragen Sie gerne nach Maßen und Aussehen).




Der Standard-Schneidewinkel beträgt $45^\circ \pm 2^\circ$; dieser Winkel kann bei der Bestellung auch auf 35° (ggf. zur Reduzierung der Kompression für Dünnschnitte weichen Materials) oder 55° (ggf. für harte Materialien) festgelegt werden. Microstar führt Unterteilungen in Diamantmesser für Ultramikroskopie, Kryo-Ultramikrotomie „Nass“ und „Trocken“, Materialwissenschaften, Histo-Diamantmesser oder Histo-Diamantmesser mit Kryoschnitten. DDK bietet Ultramikrotomie- (auch geeignet für Tiefsttemperaturen) und Histo-Diamantmesser.

Neue Ultramikrotomie-Messer DDK:

ND446	DDK-Diamantmesser 1,0 - 1,4 mm
ND447	DDK-Diamantmesser 1,5 - 1,9 mm
ND440	DDK-Diamantmesser 2,0 - 2,4 mm
ND441	DDK-Diamantmesser 2,5 - 2,9 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

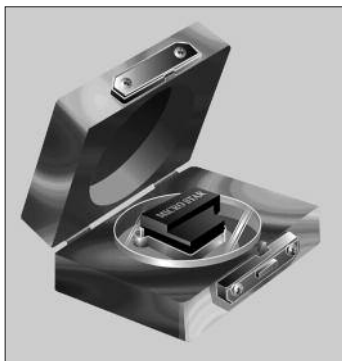


Neue Ultramikrotomie-Messer Microstar:

122SU10	Microstar-Diamantmesser 1,0 mm
122SU12	Microstar-Diamantmesser 1,2 mm
122SU14	Microstar-Diamantmesser 1,4 mm
122SU15	Microstar-Diamantmesser 1,5 mm
122SU16	Microstar-Diamantmesser 1,6 mm
122SU20	Microstar-Diamantmesser 2,0 mm
122SU25	Microstar-Diamantmesser 2,5 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Für DDK und Microstar gibt es einen Nachschleifdienst. Sprechen Sie uns gerne bzgl. der Vorgehensweise und des Preises an.

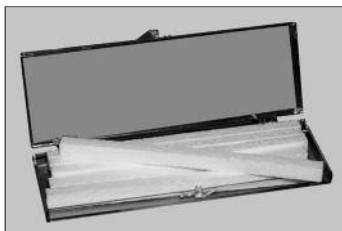

Diamantmesser-Reinigungsstäbchen


Es werden besonders Stäbchen aus hochdichtem Polystyren-Schaum empfohlen (üblicher Polystyren-Schaum ist nicht geeignet).

C899 Reinigungsstäbchen aus Polystyren. Pack zu 6 Stück

Holundermark-Stäbchen

Zum Reinigen von Diamantmessern.


C803 Holundermark-Stäbchen, Bündel zu 10 Stück

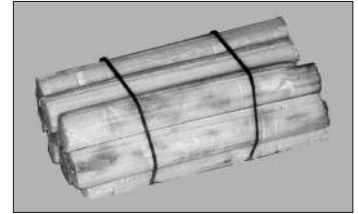


Rasierklingen-Halter und Klingen

Ein einfaches Hilfsmittel zur sicheren Handhabung nichtverdickter, einseitig geschliffener Klingen. Leicht zu laden.

T567 Rasierklingen-Halter
T568 Injektor-Klingen. Spender mit 20 Stück
T569 Ersatz-Klingen, Kohlenstoffstahl. Schachtel zu 250 Stück
T569A Ersatz-Klingen, rostfreier Stahl. Schachtel zu 250 Stück
121-4 Injektor-Klingen, teflonbeschichtet, 20 Stück im Spender

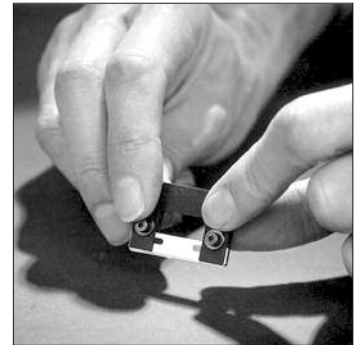


27238 DuraEdge® 7223 Niedrigprofil-Einwegmikrotomklingen, teflonbeschichtet, 77 mm x 8 mm x 0,3 mm dick, Spender mit 50 Klingen

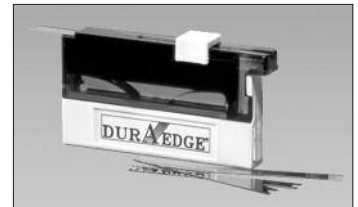

27241 DuraEdge® 7310 Hochprofil-Einwegmikrotomklingen, teflonbeschichtet, 77 mm x 14 mm x 0,3 mm dick, Spender mit 50 Klingen

27243 DuraEdge® 7203 Hochprofil-Einwegmikrotomklingen, keramikbeschichtet, 77 mm x 14 mm x 0,3 mm dick, Spender mit 50 Klingen

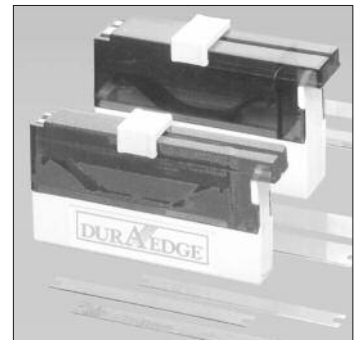


Rasierklingen

Einseitig geschliffene Klingen mit verdickter Griffseite. Geeignet zum Trimmen von Blöcken und für viele andere Schneidearbeiten.

T585 Rasierklingen, einseitig geschliffen, Kohlenstoffstahl. Schachtel zu 100 Stück
T586 Rasierklingen, einseitig geschliffen, rostfreier Stahl. Schachtel zu 100 Stück



T586A APOLLO-EVERSHARP-Klingen, einseitig geschliffen, Schwedenstahl. Schachtel zu 100 Stück

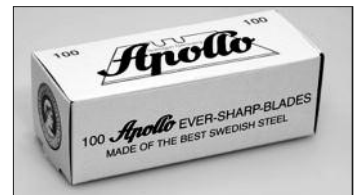


T5016 Rasierklingen, einseitig geschliffen, Kohlenstoffstahl, schwere Ausführung. Schachtel zu 100 Stück

T5332 Rasierklingen, einseitig geschliffen, rostfreier Stahl. Mit Teflon beschichtet, 100 Stück



Trim-Safe

Trim-Safe schützt die Finger während des Schneidens und Trimmens mit Rasierklingen. Die Klingen werden eingeschoben.

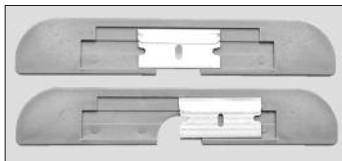


81117 Trim-Safe, 1 Stück

81117-1 Trim-Safe, 12 Stück

Brechbare Rasierklingen

Für bestimmte Anwendungen werden der Länge nach halbierte Klingen verwendet. Beim Brechen entsprechenden Finger- und Augenschutz tragen. Die FEATHER-Klingen sind besonders zur Verwendung in Vibratomen geeignet.

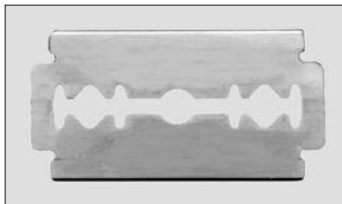

121-6 Doppelseitig geschliffene Klingen, 37 mm lang, 0,12 mm dick, Edelstahl, 250 Stück




121-9 Doppelseitig geschliffene FEATHER-Klingen, 37 mm lang, 0,13 mm dick, Kohlenstoffstahl, 10 Stück

Lange Klingen


Besonders lange Klingen gibt es in den Ausführungen mit und ohne gefasstem Rücken.



73-020 Lange APOLLO-Klingen aus kohlenstoffhaltigem Messerstahl, 100 mm lang, 22 mm breit, 0,20 mm dick. 250 Stück

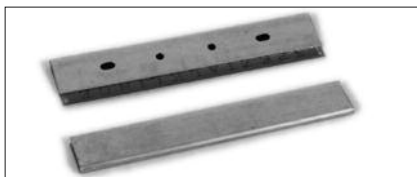

73-020H Halter mit Schutzkappe aus Messing für Klinge 73-020

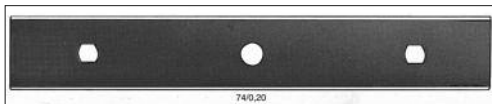


74-020 Lange APOLLO Klingen aus kohlenstoffhaltigem Messerstahl, 150 mm lang, 22 mm breit, 0,20 mm dick. 250 Stück

121-10 Lange WECK-Klingen mit gefasstem Rücken, aus Kohlenstoffstahl, 57 mm lang, 0,28 mm dick. 50 Stück

Miniatursäge

Zum Aufsägen flacher Einbettungsblöcke geeignet. Länge 75 mm, Höhe 25 mm.

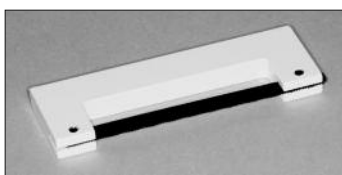

T581 Miniatursäge

T582 Blätter für T581. Pack zu 10 Stück

Marderhaar-Pinsel

Zum genauen Manövrieren von Proben und Netzchen sowie zum vorsichtigen Entstauben von Rasterproben.

G3440	Marderhaar-Pinsel Größe 3; 4,0 mm breit, Satz zu 3 Stück
G3441	Marderhaar-Pinsel Größe 2; 3,0 mm breit, Satz zu 3 Stück
G3442	Marderhaar-Pinsel Größe 1; 2,0 mm breit, Satz zu 3 Stück
G3443	Marderhaar-Pinsel Größe 0; 1,5 mm breit, Satz zu 3 Stück
G3444	Marderhaar-Pinsel Größe 00; 1,2 mm breit, Satz zu 3 Stück
G3445	Marderhaar-Pinsel Größe 000; 0,8 mm breit, Satz zu 3 Stück
G3446	Marderhaar-Pinsel, Satz zu 6 Stück, einer jeder Größe




Zur Manipulation von Ultra-Dünnschnitten im Messerboot eines Ultramikrotoms oder zur Manipulation feinsten Proben.

113	Feine Wimper im Holzgriff (feine, gleichmäßig spitz zulaufende Wimper der besten Qualität)
------------	--



119	Ultrafeines Rotwild-Haar im Holzgriff
------------	---------------------------------------

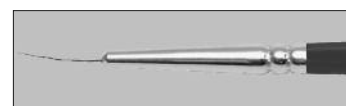

Perfekt-Kescher

In dem Wechselhalter aus Messing und einer Spitzen-Aufnahme aus Kohlenstoffstahl werden verschiedene Nadeln und auch Borsten eingesetzt (dient unter anderem zur Manipulation von Schnitten).

T5112	Perfekt-Kescher für Ultramikrotomie, mit Griff Loop-Maße: ca. iD 2 mm Ø, aD 2,8 mm Ø, Dicke ca. 0,05 mm Durchmesser der Öffnungen im Loop-Rahmen : ca. 0,5 mm Ø
T5113	Ersatz-Schlinge für T5112, 1 Stück
T5112LM	Perfekt-Kescher für Lichtmikroskopie, mit Griff Loop-Maße: ca. iD 4,8 mm Ø, aD 6,4 mm Ø, Dicke ca. 0,05 mm Rechteckige Öffnungen im Rahmen
T5113LM	Ersatz-Schlinge für T5112LM, 1 Stück



Halter für einzelne Borsten

In dem Wechselhalter aus Messing und einer Spitzen-Aufnahme aus Kohlenstoffstahl werden verschiedene Nadeln und auch Borsten eingesetzt (dient unter anderem zur Manipulation von Schnitten).

13560	Wechselhalter
T584	Borsten. Pack zu 10 Stück

Es können auch Insekten-/Minutiennadeln in den Halter eingesetzt werden.



Nadelhalter mit Platin-Schlinge

Dient u. a. zur Aufnahme und Übertragung von Schnitten aus dem Mikrotombad. Die Platin-Schlinge wird in einem Nadelhalter mit Schraubverschluss gehalten und lässt sich leicht durch Ausglühen reinigen.

T5010	Nadelhalter mit Platin-Schlinge
T5011	Ersatz-Platin-Schlingen, Satz zu 3 Stück





Nichrom Drahtschlingen

Aus dem von uns angebotenen Nichrom Draht können Drahtschlingen selbst hergestellt werden. Es sind auch drei Größen fertiger Nichrom-Drahtschlingen lieferbar.


E444	Nichrom Draht, 0,25 mm Ø x 30 cm
T5471	Nichrom Drahtschlingen, 1,5 mm Schlingenöffnung, 3 Stück
T5472	Nichrom Drahtschlingen, 3,5 mm Schlingenöffnung, 3 Stück
T5473	Nichrom Drahtschlingen, 5 mm Schlingenöffnung, 3 Stück
T5470	Halter für Schlingen

Insekten- und Minutiennadeln



Diese sind in unterschiedlichem Durchmesser für eine Vielzahl an Präparationsaufgaben notwendig. Sie sind aus Edelstahl gefertigt. Die Insektennadeln haben Nylonköpfe.

N5013	Insektennadeln, 0,25 mm Ø, Länge 38 mm, Pack zu 100 Stück
N5014	Minutiennadeln, 0,1 mm Ø, 12 mm, Pack zu 500 Stück
N5015	Minutiennadeln, 0,2 mm Ø, 12 mm, Pack zu 500 Stück
N5018	Insektennadeln, 0,35 mm Ø (Stärke 0), 38 mm, Pack zu 100 Stück

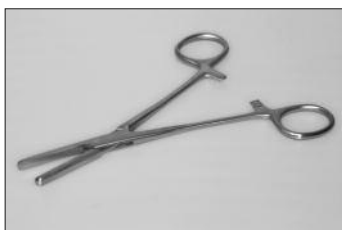


Nadelhalter

Mit diesem Nadelhalter werden die Minuten-/Insektennadeln bewegt, ohne sie zwischen den Fingern halten zu müssen.


1235	Nadelhalter
-------------	-------------

Haftplatten für Netzchen


Zur leichteren Verankerung präparierter Netzchen, auf diesen biegsamen Silikonkautschuk-Platten, in einer Petrischale. Ihre Haftkraft hält die Netzchen in den Feldern fest. Die Platten lassen sich leicht rein waschen.

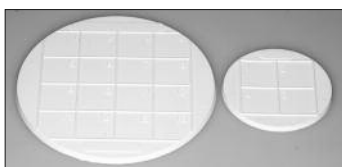

G3306	Haftplatte für Netzchen, ca. 80 mm Ø, 1 Stück
G3335	Haftplatte für Netzchen, ca. 80 mm Ø, Pack zu 10 Stück
G3308	Haftplatte für Netzchen, ca. 80 mm Ø, Pack zu 100 Stück
G3307	Haftplatte für Netzchen, 45 mm Ø, Pack zu 10 Stück.

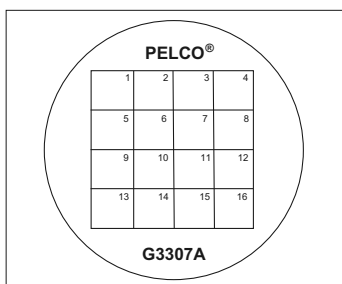

G3307A	Haftplatte für Netzchen, ca. 70 mm Ø, 1 Stück
---------------	---

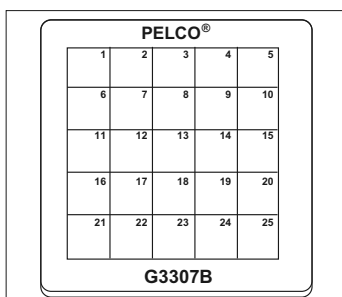


G3307B	Quadratische Haftplatte für Netzchen, ca. 70 mm x 70 mm, 1 Stück
---------------	--

Färbekissen nach CHIEN

Eine Silikonkautschukscheibe ist mit Schlitzsen versehen, in denen die Griffe der Griffnetzchen sicher gehalten werden. Ein Tropfen Färbeflüssigkeit wird sich um das senkrecht stehende Netz legen und so von beiden Seiten färben.


10523 Färbekissen nach CHIEN

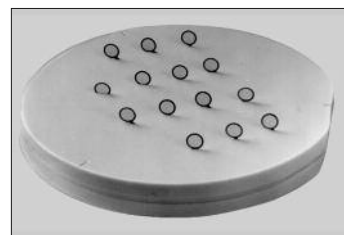

Färbekissen aus Teflon

Dieses Färbekissen mit den Außenmaßen 42 mm x 70 mm x 6,3 mm hat 40 konkave Mulden von 4,5 mm Durchmesser und 1,5 mm Tiefe. Es ist widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und lässt sich leicht reinigen. Geeignet für die Verwendung in Mikrowellenöfen.

G3765 Färbekissen aus Teflon

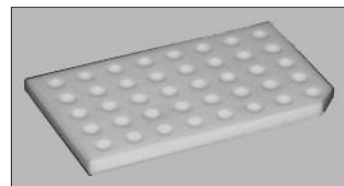

Filmklebestift Coat-Quick „G“

Schon ein leichter Überzug dieses Klebstoffes auf TEM-Trägernetzchen hält Schnitte, Formvar- oder andere Trägerfilme fest. Trocknet binnen 1 bis 2 Minuten nach dem Auftragen.

1556 Filmklebestift Coat-Quick „G“




Mikroporöse Behandlungskapseln

Kapseln der Außenmaße von je 12,5 mm Durchmesser und Höhe und den Innenmaßen 8 mm Durchmesser bei 5 mm Höhe; zum Schutz empfindlicher Proben bei der Kritisch-Punkt-Trocknung; durchgehend aus mikroporösem, durch Alkohol, Aceton und Chloroform nicht angreifbarem Kunststoffmaterial. Mit festsitzendem Einschubdeckel.

4614 Mikroporöse Behandlungskapseln, Porengröße 78 µm. 10 Stück

Bemerkung zu 4614: Dieses Produkt kann nur noch so lange geliefert werden, wie der Lagerbestand beim Hersteller dies erlaubt. Eine Neuauflage der Produktion wird es nicht geben.

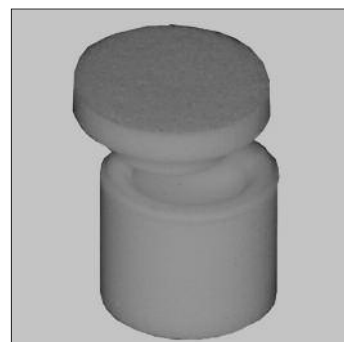

Polypropylen Becher

Sie kennen den Effekt, dass Netzchen oder Schnitte auf der Wasseroberfläche herumschwirren und einfach nicht an der gewünschten Stelle bleiben. Destilliertes Wasser, das für die Verwendung in Glas- oder Diamantmesserschiffchen in den hier aufgeführten Polypropylenbechern aufbereitet wurde, ist frei von elektrostatischer Aufladung. Netzchen, Schnitte und vor allem Serienschritte bleiben ruhig liegen.

12901 Polypropylenbecher, 30 ml, 100 Stück

